


# Desinfektionswannen

## Manuelle Instrumenten-Aufbereitung



**Anwenderfreundliche und hochwertige Desinfektionswannen für das sichere Ansetzen von Desinfektions- und Reinigungslösungen in der manuellen Instrumenten-Aufbereitung.**

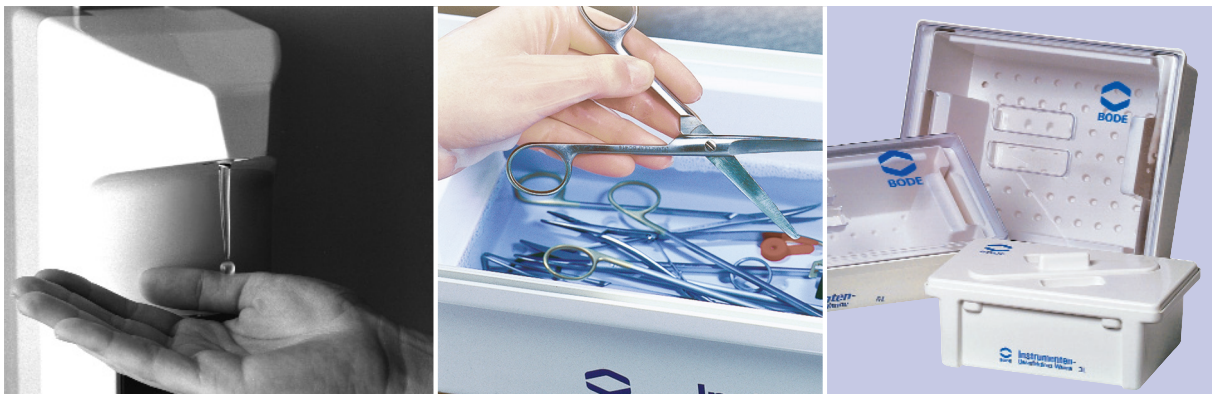

# Desinfektionswannen

Richtig angewandt werden Produkte zur Instrumenten-Aufbereitung in dafür eigens konzipierten Desinfektionswannen. Diese Wannen bieten einen sicheren Schutz für Sie, dem Verwender, da das System den jeweiligen Anforderungen aller Bereiche des Krankenhauses, der Arztpraxis und des Labors angepasst ist. Das beginnt mit dem Siebeinsatz, der das Herausnehmen der eingelegten Instrumente ohne Berührung des Desinfektionsmittels mit den Händen ermöglicht. Hierzu wird das Sieb links oder rechts auf den Wannenbehälter gesetzt und die Desinfektionslösung kann in die Wanne abtropfen.

Die eingearbeiteten Griffmulden in Wanne und Sieb ermöglichen eine sichere Handhabung. Das robuste Wannenmaterial aus PVC ist materialbeständig gegen Desinfektionsmittel-Lösungen und Temperaturen bis 59 °C.

Abgerundet und geschlossen wird dieses BODE-Wannen-System mit einem Schlitz-Deckel – in weiß – bei der 3-Liter-Wanne oder den transparenten Deckeln bei der 5, 10 und 30 Liter-Wanne.

## Materialverträglichkeit

Unsere Wannen sind gegenüber allen unten aufgeführten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln materialverträglich. Ebenso gegenüber den chemischen Lösungen NaOH, NaOCl und GdnSCN, die für die Desinfektion bei CJK vom RKI vorgeschlagen werden.


## Packungen

Desinfektion		
Packung	Produkt	No.
2 Liter-Flasche	Bomix®	10299
5 Liter-Kanister		20299
2 Liter-Flasche	Korsolex® AF	972822
5 Liter-Kanister		972829
2 Liter-Flasche	Korsolex® basic	972672
5 Liter-Kanister		972679
500 ml-Flasche	Korsolex® extra	973805
2 Liter-Flasche		973802
5 Liter-Kanister		973809
2 Liter-Flasche	Korsolex® FF	973882
5 Liter-Kanister		973889
500 ml-Flasche	Korsolex® plus	973895
2 Liter-Flasche		973892
5 Liter-Kanister		973899
200 Liter-Fass		973898

## Reinigung

Packung	Produkt	No.
500 ml-Flasche	Bodedex® forte	973765
2 Liter-Flasche		973762
5 Liter-Kanister		973769

### 3 Liter-Desinfektionswanne

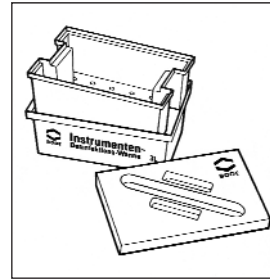

Ausführung: Wanne mit Deckel und Siebeinsatz aus PVC

Farbe: weiß


Deckel: weiß, mit Schlitz

Nutzinhalt: 3 Liter mit Strichmarkierung

Abmessung: L x B x H in mm 300 x 200 x 110

Bestell-Nr.: 88296

### 5 Liter-Desinfektionswanne

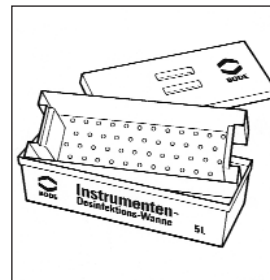

Ausführung: Wanne mit Deckel und Siebeinsatz aus PVC

Farbe: weiß


Deckel: transparent

Nutzinhalt: 5 Liter mit Strichmarkierung

Abmessung: L x B x H in mm 550 x 200 x 120

Bestell-Nr.: 88286

### 10 Liter-Desinfektionswanne

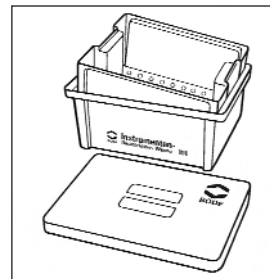

Ausführung: Wanne mit Deckel und Siebeinsatz aus PVC

Farbe: weiß


Deckel: transparent

Nutzinhalt: 10 Liter mit Strichmarkierung

Abmessung: L x B x H in mm 390 x 290 x 170

Bestell-Nr.: 88294

### 30 Liter-Desinfektionswanne

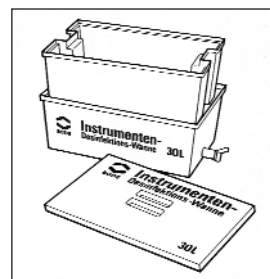

Ausführung: Wanne mit Deckel und Siebeinsatz aus PVC mit Auslaufhahn

Farbe: weiß

Deckel: transparent

Nutzinhalt: 30 Liter mit Strichmarkierung

Abmessung: L x B x H in mm 615 x 400 x 220

Bestell-Nr.: 88297

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.